


FreeStyleリブレProをお使いの患者さんへ



上腕後部に装着されたセンサーは
最長14日間そのままにしてください。
センサーの取り外しおよび再装着はしな
いでください。外れた場合は主治医（医
療機関）に連絡してください。

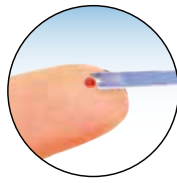

血糖自己測定は継続してください。
主治医から指示されている血糖自己測定
と記録は通常どおりに行ってください。



装着中はセンサーが外れないようにご注意ください。



ドア、家具、人、その他に
センサーをぶつけたり
引っかけたりしないよう
注意してください。



からだを洗ったり、拭いたり
するときに、センサーを引っかけたり
引っばったりしないようにしてください。
※水深1メートルより深いところにセンサーを入れ
たり、30分以上水に浸したりしないでください。



センサーや粘着剤を触る、
押す、引っばるなどは
しないでください。



センサーが外れるおそれ
があるため、腕周りが
ピッタリした服は避けてください。



衣服の着脱時にセンサーを
ぶつけたり引っかけたり
しないよう注意してください。



体が接触するスポーツや
センサーが外れるおそれのある
激しい運動は避けてください。

次のような場合は、主治医(医療機関)に連絡してください。

- ・ センサーが外れた場合（外れたセンサーは捨てずに保管してください。外れたセンサーにもグルコース値のデータが保存されている可能性があります。）
- ・ センサー装着部に刺激感や不快感がある場合。
- ・ センサーについて質問などがある場合。



FreeStyle
リブレPro

*FreeStyleリブレProシステムの詳細情報については、
製品の説明書をご覧ください。

FreeStyleとその関連ブランドマークは、
諸管轄地のAbbott Diabetes Care, Inc.が所有する商標です。

お客様
相談窓口

0120-37-8055

月曜日～金曜日 ▶ 8:00～20:00 土・日曜日・祝祭日・12/31～1/3 ▶ 8:00～17:00

Abbott