

FS血糖測定電極 ライト フリースタイルフリーダム™ ライト


「あっ、できた!」

「これなら続けられそう」 そんな前向きな気持ちを患者さまに届けたい。







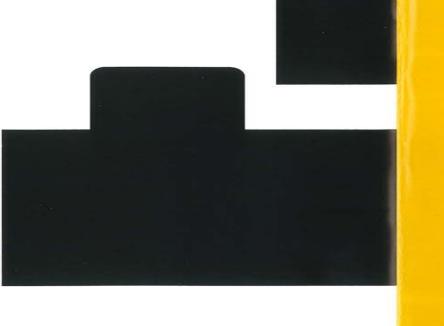



世界最少の血液量0.3µL、 世界最短の測定時間で約4秒、 あつ、という間の血糖測定。

専用血糖自己測定器 フリースタイルフリーダム™ ライト



「FS血糖測定電極ライ ト」は、コンパクトで 持ち運びに便利な専用 血糖自己測定器「フ リースタイルフリーダ ム™ライト」対応の電

新形状「ZipWik®」デザインの採用により、世界最少®の血液量、世界最短®の測定時間を実現させる 「FS血糖測定電極ライト」が、ついに誕生。

この「ZipWik®」を備えたFS血糖測定電極ライトにより、初めて血糖測定する患者さまや、 電極への血液点着が苦手だった患者さまでも、スムーズに血糖測定をおこなうことができます。

「フリースタイル血糖測定システム」10のポイント



血液量は世界最小®の0.3μL

測定に必要な血液量は世界最少®の0.3 µL。わずかな血液で測定 できるので、十分な血液量を得るために深く穿刺したり、穿刺 部をしぼる必要がありません。



測定時間は世界最短*の約4秒

「フリースタイル血糖測定システム」の測定時間は、世界最短* の約4秒。日常生活の合間に、どなたでもあっという間に測定す ることができます。



マルトースの影響を受けない

酵素にGDH、補酵素にFADを使用することで、マルトースの影



60秒以内なら追加点着できる

血液量が不足した場合、血液を電極に点着してから60秒以内で あれば点着をやり直すことができます。



薬剤の影響を受けにくい

オスミウム複合体を使用することで、低電圧での測定が実現。 これにより、酸化還元時の干渉物質の生成を抑え、測定結果へ の影響を受けにくくしています。



ヘマトクリット値の レンジは15~65%

Ht. 範囲は15~65%。様々な症状の患者様にも幅広く対応でき



新デザインの「ZipWik®」

血液をよりかんたんに点着させることができる新形状の 「ZipWik®」デザインを採用。



触覚的に確認できる

「ZipWik®」により、血液点着ポートを皮膚の感覚を通じて触覚的 に確認することができます。



指先以外の血液にも対応

指先はもちろん、手のひら、上腕、前腕、もも、ふくらはぎの血 液でも測定でき、常に同じ部位から血液を採取する必要がない ため、痛みや皮膚の硬化を軽減します。





たくさんの患者さまが本製品を 「使いやすい」 と答えています。

80%の患者さまが、 「慌てることなく余裕をもって 測定することができた」 と答えています。

「FS血糖測定電極ライト」は、60秒以内なら点着し直す ことが可能。1回目の血液量が不足しても慌てることな く血糖測定をおこなうことができます。



80%の患者さまが、 「血液の点着がしやすい」 と回答しています。

新形状の「ZipWik®」により、検体の接触面積が25%も 拡大した「FS血糖測定電極ライト」。また、血液点着ボー トを触覚的に確認することも可能。この電極なら、こ れまで点着が苦手だった患者さまでもスムーズに血糖




90%の患者さまが、 「血液量不足による失敗で 電極を無駄にすることが少ない」 と答えています。

「FS血糖測定電極ライト」は、血液量不足で測定を失敗 することがなく、60秒以内なら点着し直せるため、ム



米国アボット社調べ(2010年2月)

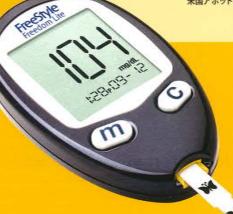





従来の直線型の点着ポートと比べて、検体の接触面積が約25% も拡大。さらに、検体の表面張力に影響されにくく、電極裏面へ 血液が流れてしまうのも防ぐので、よりスムーズな吸引を実現 します。



※当社調べ(2011年2月現在)





ポケットランセット™ オレンジ

深さ 0.5mm	(28 ゲージ)		
製品番号	70505-96	製品番号	70505-97
JAN ⊐− ド	4987439076607	JAN ⊐− F	4987439076614
包装単位	26本	包装単位	31本
希望小売価格	650円(税抜)	希望小売価格	775円(税抜)



ポケットランセット™ ブルー

||型証券長・221AFBZY00013000

深さ 0.8mm	(28ゲージ)	A SALES	
製品番号	70505-93	製品番号	70505-94
JAN ⊐− F	4987439072371	JAN ⊐− F	4987439072388
包装単位	26本	包装単位	31本 =
希望小売価格	650円(税抜)	希望小売価格	775円(税抜)



ポケットランセット™ イエロー

認証番号: 221AFBZX00013000

製品番号 70505-95 JAN コード 4987439072395 包装単位 31本 希望小売価格 775円(税抜)

[フリースタイルフリーダム™ライト/FS血糖測定電極 ライト: 製造販売元]

アボット ジャパン株式会社

千葉県松戸市松飛台 278

0120-37-8055

月曜日~金曜日 + 8:00~20:00 土·日曜日·祝祭日·12/31~1/3 + 8:00~17:00

[ポケットランセット™:製造販売元]

株式会社 旭ポリスライダー 岡山県真庭市三崎 860-2

[ポケットランセット™:発売元]

アボット ジャパン 株式会社 本社/〒108-6305 東京都港区三田3-5-27

