




# 自己検査用グルコース測定器 フリースタイルプレジジョンネオ™ 測定方法

その違い、明日につながる。

FreeStyle




フリースタイルプレジジョンネオ™

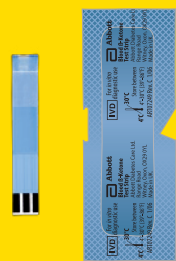


FSプレジジョン  
血糖測定電極

## ① 電極を開封

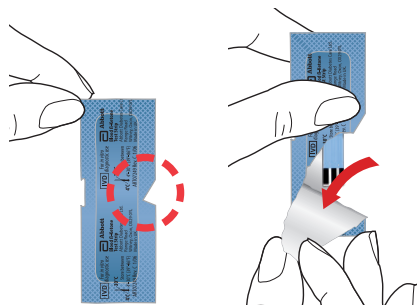


電極の切り込み部分から斜めに切れ目を入れ、  
包装の側面を裂きます。

## ② 電極を差し込む

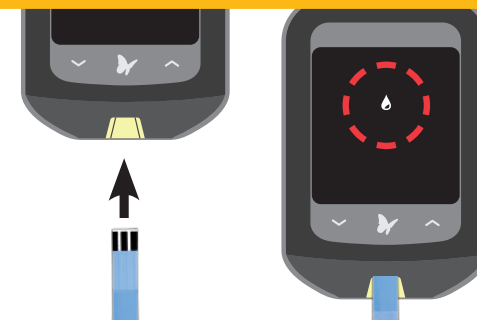

挿入口に電極を差し込みますと、血液滴下マーク  
が表示されます。

## ③ 血液を吸引

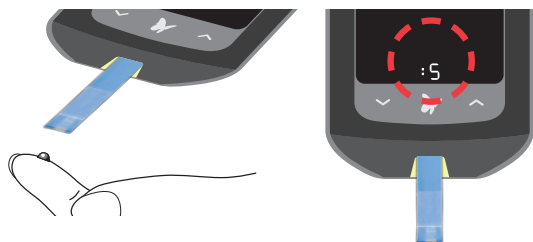


穿刺をし、電極に血液を点着してください。  
必要な量に達したら、画面上でカウントダウン  
が始まりますので指を離してください。

## ④ 5秒後に測定結果を表示



カウントダウンが終わったあとに測定結果が画  
面に表示されます。

## ⑤ 電極を取り外す

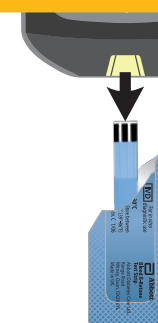


開封済みの包装を使って抜き取ると破棄の際に  
便利です。

※測定の前には、流水で手洗いを行ってください。

## 測定器の表示情報

### 〔低血糖〕

	<p>測定結果が70mg/dL未満、または医療従事者が測定器に設定した目標値より低いときに表示されます。</p>
<p>点滅する赤い矢印</p>	<p>低血糖のパターンが得られました。過去5日間に2回の低値が得られ、かつ、その2回の結果が同じ3時間の時間枠で得られた場合、測定器には点滅する↓が表示されます。</p>

### 〔高血糖〕

	<p>測定結果が240mg/dLよりも高い、あるいは医療従事者が測定器に設定した目標値より高い場合に、表示されます。</p>
<p>点滅する黄色い矢印</p>	<p>高血糖のパターンが得られました。過去5日間に3回の高値が得られ、かつ、その3回の結果が同じ3時間の時間枠で得られた場合、測定器には点滅する↑が表示されます。</p>

【重要】低値または高値の測定結果は、深刻な病状である可能性を示しています。治療方針の決定や変更は、必ず医師の指導のもとで行なってください。

## エラーメッセージ


メッセージ	状 況	対処法
E-1	周辺の温度が高すぎるか、低すぎるため、測定器が正常に機能していません。	1.電極の操作温度範囲内の場所に測定器と電極を移動し、測定器と電極が新しい温度になじむまで待ちます。 2.それでもエラーが表示される場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
E-3	血糖値が著しく低く測定範囲を超えているか、もしくは血液量が不足しています。電極に問題がある可能性があります。	測定手順を確認し、再度測定を行ってください。それでもエラーが表示される場合は、直ちに医師にご連絡ください。

メッセージ	状 況	対処法
E-4	血糖値が著しく高く測定範囲を超えているか、もしくは電極に問題がある可能性があります。	測定手順を確認し、再度測定を行ってください。それでもエラーが表示される場合は、直ちに医師にご連絡ください。
E-7	電極が損傷しているか、使用済みである可能性があります。もしくは測定器が電極を認識していません。	専用の電極を使用していることを確認してください。それでもエラーが表示される場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。


## 測定器の時刻設定 ※あらかじめ設定されています。

### 〔時刻の設定〕

- 測定器の電源がオフの状態（電極が挿入されていない状態）で開始します。  
➡を押して次に進みます。
- 画面上の時刻表示を、画面が変わるまで3秒間押し続けてください。

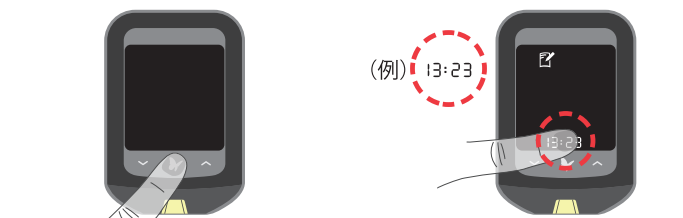


- 時刻の表示形式（12時間または24時間）を設定します。  
・～またはへを押して変更します。  
・➡を押して次に進みます。
- 時間・分を設定します。  
・表示が点滅している間に、～またはへを押して、時間と分を設定します。  
・➡を押して次に進みます。

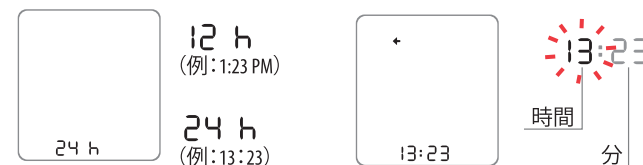

### 〔日付の設定〕

- 月と日付を設定します。  
・表示が点滅している間に、～またはへを押して、月と日付を設定します。  
・➡を押して次に進みます。
- 年を設定します。  
・～またはへを押して、年を設定します。  
・➡を押して、保存します。これで設定は完了です。

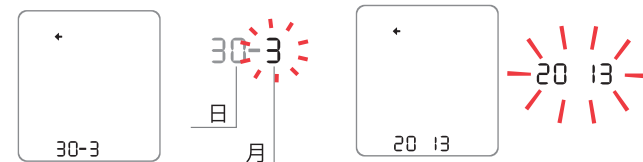

## 電池の交換



電池量が少なくなると、この画面が表示されます。電池を交換してください。最初にこの警告が表示されてから、電池の交換が必要となるまでに約28回の測定を行なうことができます。

注：電池を交換しても、測定器の設定およびログブックの情報は、保存されています。

アボット ジャパン株式会社

千葉県松戸市松飛台 278

お客様  
相談窓口

0120-37-8055

月曜日～金曜日 8:00～20:00 土・日曜日・祝祭日 12/31～1/3 8:00～17:00

Abbott  
Diabetes Care

2M1501 AC12C 0315